

#whdentalwerk



video.wh.com

Ahora en su  
distribuidor o  
en [wh.com](http://wh.com)



«Assistina

ONE



la única que acelera  
MI trabajo.»



assistina<sup>ONE</sup>

## Assistina ONE, la única que ofrece un mantenimiento perfecto

Assistina ONE es la primera opción para el mantenimiento de instrumentos de transmisión dentales, como piezas de mano, micromotores y scalers de aire. La nueva generación del dispositivo de puerto único de W&H está equipada con el excepcional sistema Quick Connect para el cambio de piezas de mano. Se adapta fácilmente a las necesidades individuales y se integra a la perfección en cualquier flujo de trabajo.



### Ventanilla abatible extraíble

Sella la zona de mantenimiento y se puede desmontar fácilmente



**Sistema Quick Connect**  
Cambio flexible entre piezas de mano gracias a los adaptadores Quick ISO y Quick RM



### Botón de inicio One Touch

Para un uso fácil e intuitivo

### Tiempo de ciclo rápido

Solo 18 segundos para todo el proceso de lubricación y limpieza



### Cartuchos listos para usar

Para una sustitución fácil, limpia y rápida del Service Oil y el Activefluid



### Filtro HEPA

Para cumplir las normas higiénicas y para mantener un entorno de trabajo limpio



### Superficies lisas

Para una limpieza a fondo del dispositivo



## Assistina ONE, la única que está lista con tan solo pulsar un botón

La lubricación y la limpieza completas de los canales de spray apenas tardan 18 segundos. Así, Assistina ONE es la solución de mantenimiento más rápida de su clase. Funciona exclusivamente con aire comprimido y no es preciso conectarla a la red. Assistina ONE se coloca y se prepara para su uso con rapidez. Su botón de inicio One Touch y el práctico sistema de cartuchos con aceite y líquido de limpieza la convierten en una solución de mantenimiento moderna para consultas y clínicas dentales que tienen exigencias elevadas con respecto al mantenimiento de las piezas de mano.



«Assistina

ONE



la única que ME presta apoyo.»

## Assistina ONE, la única que es exhaustiva

Los instrumentos de transmisión de calidad requieren un mantenimiento también de calidad. De hecho, un mantenimiento profesional y correcto desempeña un papel clave en la vida útil y el valor duradero de las piezas de mano. El dispositivo ofrece un mantenimiento perfecto y ejecuta debidamente los ciclos de lubricación necesarios para el funcionamiento de las piezas de mano dentales y para que estas tengan una larga vida útil.

### Assistina ONE, la única que es eficiente

Con el revolucionario proceso de nebulización de aceite, los instrumentos de transmisión dentales se lubrican de forma más rápida y más en profundidad que nunca. En primer lugar, el aceite se pulveriza en el adaptador hasta lograrse una neblina fina que, después, se sopla a alta presión al instrumento de transmisión. Se elimina toda la contaminación del instrumento de transmisión y se lubrican todos los engranajes sin ponerlos en movimiento. Los aerosoles se aspiran de forma activa de la cámara y el aire de ventilación se limpia mediante un filtro HEPA para que el entorno de trabajo sea limpio y seguro.

### Assistina ONE, la única que es efectiva

Assistina ONE permite una lubricación en profundidad de todos los engranajes, la correcta limpieza de los canales de spray y el secado de los engranajes interiores con aire comprimido. La limpieza de los canales de spray evita que se produzcan obstrucciones por depósitos de cal y garantiza con ello un funcionamiento sin incidencias, una vida útil más prolongada y unos costes de servicio inferiores.



**Naranja:**

Lubricación exhaustiva de los engranajes

**Verde:**

Correcta limpieza de los canales de spray y secado de los engranajes interiores

## Assistina ONE, la más flexible

Assistina ONE se orienta por completo a los requisitos de sus usuarios en las clínicas dentales. Distintos adaptadores para lograr una gran flexibilidad, diseño intuitivo para permitir un uso cómodo y resultados de procesamiento impresionantes. Esta nueva generación de Assistina, con tan solo una conexión, lleva el mantenimiento de las piezas de mano, los micromotores y los scalers a un nivel totalmente nuevo.



## Assistina ONE, la más rápida

Nunca antes había resultado tan fácil cambiar piezas de mano como con el revolucionario sistema Quick Connect de W&H. Basta con conectar el adaptador Quick ISO o el Quick RM para proceder al mantenimiento de todos los instrumentos de transmisión con conexión estándar ISO o de 4/6 vías. La amplia selección de adaptadores permite a Assistina ONE satisfacer los requisitos de consultas y clínicas dentales de todo tipo.

**Quick RM** para turbinas



**Quick ISO** para piezas de mano y contra-ángulos



### **Assistina ONE, la única que se adapta**

Para conexiones específicas, como Roto Quick, seleccione el adaptador adecuado, conéctelo fácilmente y listo! Escanee el código QR para ver la gama completa de adaptadores.



## Assistina ONE, la única que facilita MI trabajo

Seleccionar el adaptador.



Conectar la pieza de mano.



Cerrar la ventanilla abatible.



Pulsar el botón de inicio. El programa de limpieza y de lubricación comienza de inmediato.



La limpieza y la lubricación habrán concluido al cabo de apenas 18 segundos, y la pieza de mano estará perfectamente preparada.



## ONE, el aceite único



El mantenimiento de piezas de mano con Assistina ONE resulta más económico que si se realiza manualmente o si se utilizan otros sistemas. Los ensayos de laboratorio con aceites han revelado que el aceite Assistina One Care Set MD-302 hace que se reduzca considerablemente la fricción y la abrasión de los engranajes en comparación con los productos más comunes de la competencia.

**Es posible reducir la abrasión de los engranajes entre un 28 y un 77 %.**

## ONE en lugar de 20



=



\*400 ml por botella de aceite en spray

El Assistina Care Set equivale a 20 botellas de aceite en spray MD-400\*. Pueden prepararse más de 2800 piezas de mano, lo que ahorra tiempo, dinero y residuos. Assistina ONE ofrece una lubricación máxima con un desgaste mínimo, lo que la convierte en una solución sumamente económica.

#whdentalwerk  
 f @ in  
 video.wh.com

Ahora en su  
 distribuidor o  
 en [wh.com](http://wh.com)



«Assistina

ONE

la única que  
 ME hace feliz.»



assistina ONE

**Uso rápido, exhaustivo y cómodo**


Assistina ONE hace que el mantenimiento de piezas de mano dentales resulte más sencillo, con lo que el trabajo avanza con mayor rapidez. Gracias al tiempo de ciclo más corto de su clase y a sus excepcionales resultados, la innovadora Assistina ONE es una solución de mantenimiento de la máxima calidad diseñada para profesionales de la odontología.

W&H AIMS  
**¡La seguridad es lo primero!**



La higiene tiene una importancia vital en la clínica dental. W&H AIMS está aquí para ayudar con una amplia gama de productos, conocimientos fundamentales y toda la información pertinente en un solo vistazo.

Para su seguridad y la de sus pacientes.  
[aims.wh.com](http://aims.wh.com)

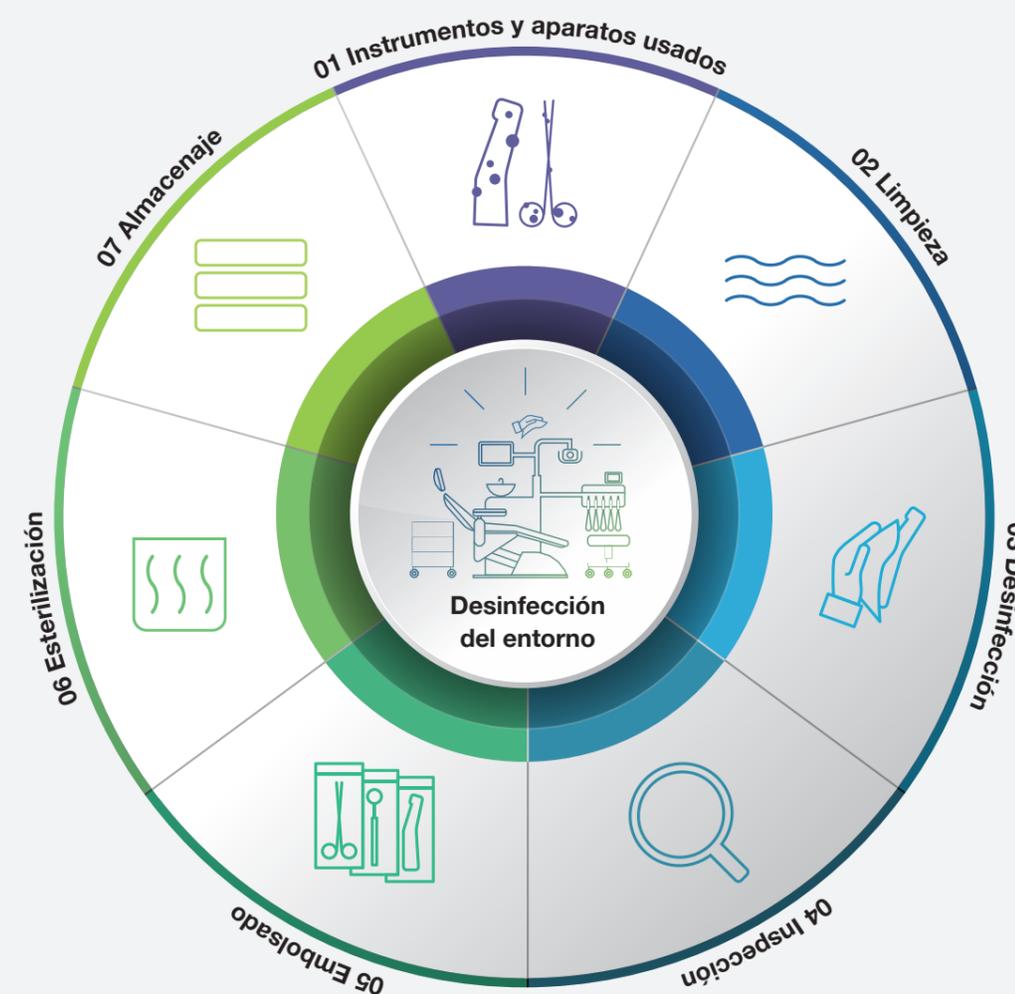

# Datos técnicos

<b>Nombre comercial:</b> <b>Tipo:</b>	<b>Assistina One</b> <b>MB-301</b>
<b>Procedimiento:</b>	Limpieza de los canales de spray, lubricación
<b>Adecuado para:</b>	Piezas de mano y contra-ángulos, turbinas, scalers de aire, micromotores de aire
<b>Consumo de aire:</b>	Aprox. 50 NI/min
<b>Presión de servicio:</b>	De 5 bar a 10 bar (regulación mediante un regulador de presión integrado automático)
<b>Dimensiones (an x al x pr):</b>	166 x 383 x 243 mm
<b>Peso:</b>	2,2 kg
<b>Volumen de llenado:</b>	200 ml de W&H Activefluid (solución limpiadora) 200 ml de W&H Service Oil F1



## Assistina ONE Care Set

El set incluye un cartucho de solución limpiadora, un cartucho de Service Oil F1 y un filtro HEPA. Todos los consumibles se pueden cambiar fácilmente y sin herramientas.

### Fabricante:

**W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH**  
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1  
5111 Bürmoos, **Austria**  
**t** +43 6274 6236-0  
**f** +43 6274 6236-55  
office@wh.com  
**wh.com**

### Distribución:

**Wehadent Ibérica S.L Unipersonal**  
C/Canónigo Tárrega, 33  
46014 Valencia, **España**  
**t** +34 96 353 20 20  
oficinas.es@wh.com  
**wh.com**